

徘徊や離床をすばやく通報して事故を防止します！

特 長

- **設置が簡単**
床面に置くだけなので設置が簡単です。
- **耐久構造**
丈夫な材質と構造で耐久性があります。
- **防水構造**
防水構造で水洗いOKです。
- **折りたたみ構造**
2つに折りたたみできますので持ち運びや保管が便利です。
- **エッジカバー付き**
エッジカバーを付け、外周のめくれを防止しました。

【注】本品はナースコール接続やワイヤレスコール接続が別途必要です。

用途例

● **ベッドからの転落通報**
(早期検知で事故防止)

ふむナルLWエア

● **床に足をついたとき**
(早期徘徊防止)



ふむナルLWエア

● **通路を通過したとき**
(早期徘徊防止)

ふむナルLWエア

● **ベッドからの立上り・移動**
(早期徘徊防止)


ふむナルLWエア

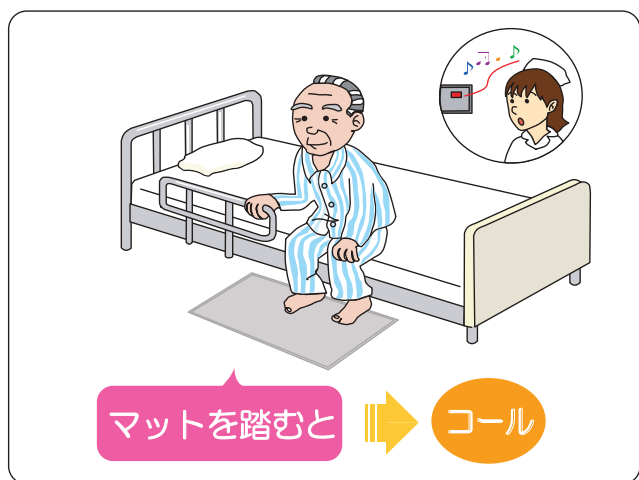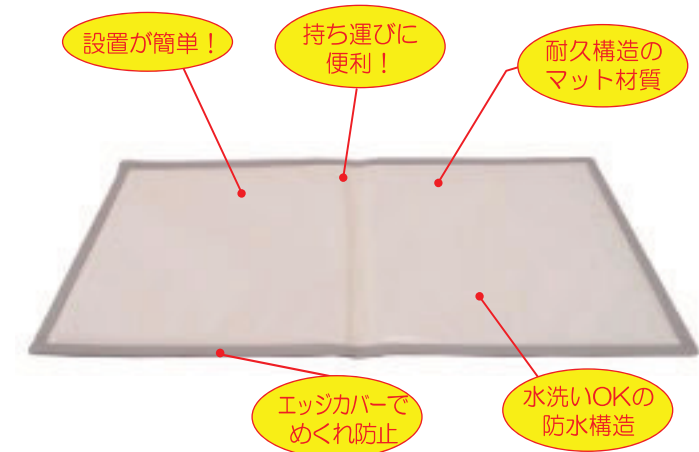

ベッドの横・部屋や玄関の出口の床に置きます。

マットを踏むと離れた場所の介護者にすぐにお知らせします。

使用例

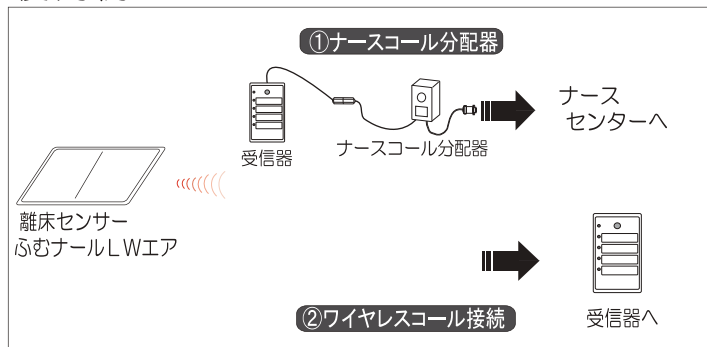

※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器が別途必要です。
ナースコールコネクタの形状をご確認ください。

仕 様

品 名	離床センサー「ふむナルLWエア」
品 番	00127C00
電 源	送信器：ボタン電池（DC3V）
検 知 方 式	マットを踏むと、検知して通報
防 水 性	防水構造
構 成	センサーマット
通 報 方 式	①ナースコール分配器 (別途費用) ②ワイヤレスコール
外 形 寸 法	幅500×長900×厚5mm
質 量	1.5 kg
価 格	59,400円（税抜54,000円）

JANコード 4560346575649

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

【お問い合わせ先】

一 医療福祉に技術で貢献する
トクソー技研株式会社

◇本社・工場
〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP <http://www.tokuki.net>
00127P00 2020.10