

コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

コミュニケーションアプリ LINE(ライン) (以下 LINE と略します。)を利用するために、まず、最初に次の手順でインターネットの設定、LINE のインストールを行います。



補足

LINE のセットアップについて

マウス操作盤にて、「伝の心」側のセットアップは可能ですが、「伝の心」以外の操作も必要となります。

必ず支援者の方と一緒に行ってください。

1

「新しいネットワークのセットアップ」等を利用して、インターネットに接続可能な環境を構築します。



制限

インターネットに接続可能な環境の構築は、ご契約のインターネット接続業者より受け取られた設定資料に基づいて、行ってください。不明点は、ご契約のインターネット接続業者にお問い合わせください。



制限

ネットワーク接続機器(モデム・ルーター・ハブ等)をご使用になる場合は、それぞれの機器について設定が必要です。ネットワーク接続機器の不明点は、ご購入先にお問い合わせください。

2

デスクトップのショートカットアイコン「伝の心添付資料」を開くと、伝の心の各種添付資料が入っているフォルダが開きます。




マウスでアイコンをダブルクリック



3

「LINE について」を選択して開くと、LINE のインストール方法や設定方法などが記載されているマニュアルが表示されます。

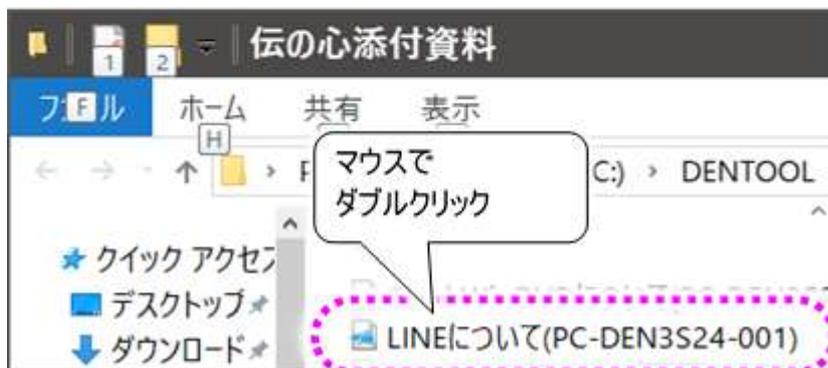

マウスでダブルクリック




コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

4

記載内容を参考にして、LINE をセットアップしてください。

5

また、Windows 操作のメニュー[LINE]から LINE を使用する場合、幾つかの注意事項と制限事項がありますので、下記ご一読ください。

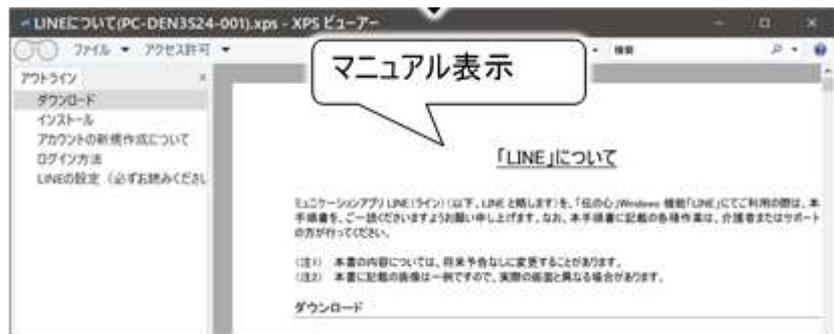

 制限	LINE の操作支援について Windows 操作のメニュー[LINE]で表示される LINE 文字盤は、LINE の操作を支援いたしますが、LINE の操作を保障するものではありません。LINE のバージョンによっては本書に記載されている通りに動作しないこともあります。
 注意	ログイン画面について 自動ログインを設定していても、明示的にログアウトしたり、ネットワークエラーでログイン失敗したり、アップデートなどの理由で LINE アプリを再起動した時は、LINE 起動時にログイン画面が表示されます。 表示された文字盤からパスワードを入力可能ですので、パスワード入力後、LINE 文字盤の[決]を選択してログインしてください。
 制限	友だちに追加したい相手には、LINE ID と、ID による友だち追加を許可の設定を、相手側で事前に行ってもらってください。
 注意	投稿する相手を確認しましょう トークの相手が正しいかどうか、投稿する前に確認しましょう。 LINE 画面右側の友だちリストまたはトークルームリストの背景に色がついている相手が現在のトークの相手となります。
 制限	LINE 操作画面に文字が残っている場合、トークルームや友達の変更ができません。また、スタンプ画面が表示できない場合があります。一度 LINE 操作画面の文字を空にして[人]や[メッセージ]、[絵文字]を選択してください。
 補足	LINE のタイムラインについて タイムラインの投稿や公開設定はマウス操作になりますので、ご自身でマウス操作盤にて行うか、支援者の方に行ってもらってください。
 補足	LINE の設定について LINE 画面左下の「…」アイコンから表示されるメニューに「設定」があります。ここから LINE の設定画面が表示可能です。
 注意	トーク履歴の保存期間について トーク履歴の保存期間は 1 ヶ月程度です。古いトークの内容は順次削除されていきます。ご注意ください。 トーク履歴をテキストファイルとして保存する方法は LINE のヘルプセンターでご確認ください。LINE のヘルプセンターの表示方法は 400 ページの「LINE のヘルプを表示する」を参照ください。

コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

LINE の起動と終了

Windows 操作からの起動と終了

1


Windows 操作画面のトップメニューより[LINE]を選択すると、LINE 操作画面とLINE 文字盤が表示され、LINE が起動します。

Windows 操作画面のメニューは非表示になります。



2

Windows 操作画面のメニューに戻る場合は、LINE 文字盤の[戻]を選択します。

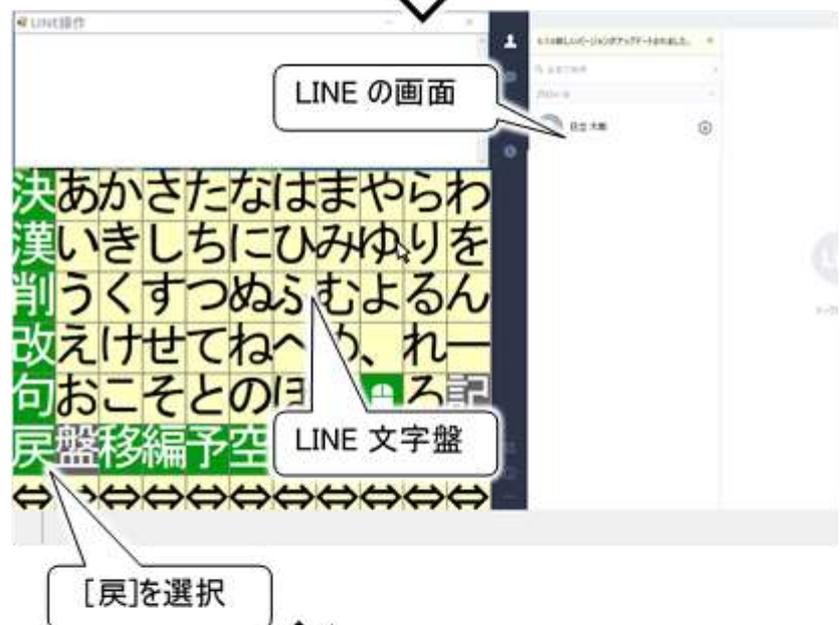


3

確認画面が表示されるので、[はい]を選択します。

4

LINE 操作画面を終了して、Windows 操作画面のメニューに戻ります

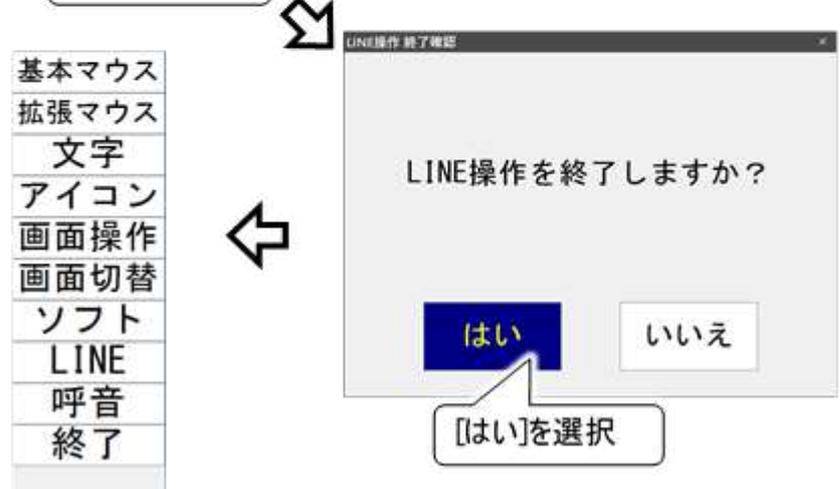


コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

メインメニューからの起動と終了

支援者用設定において、メインメニューから LINE 操作画面を呼び出す設定を行うことが可能です。設定の方法は、211 ページの「電子メール機能・LINE 操作機能のメニューを表示する」にて説明しています。


1

「伝の心」トップ画面のメインメニューより[LINE]を選択すると、LINE 操作画面と LINE 文字盤が表示され、LINE が起動します。

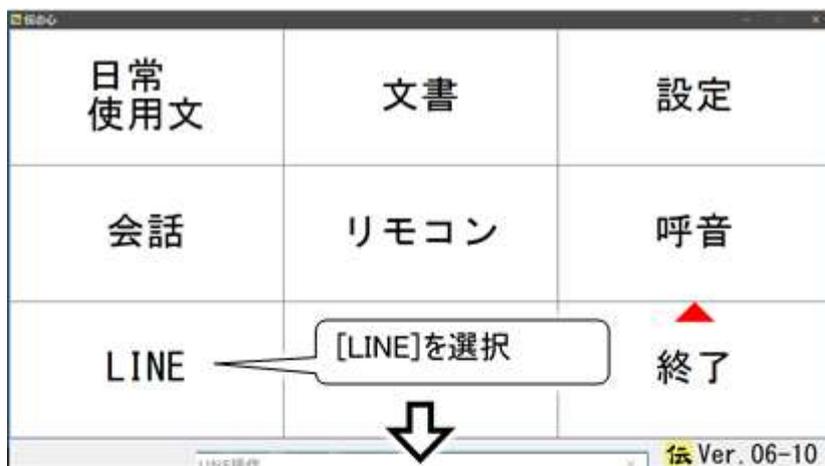

2

「伝の心」トップ画面に戻る場合は、LINE 文字盤の[戻]を選択します。

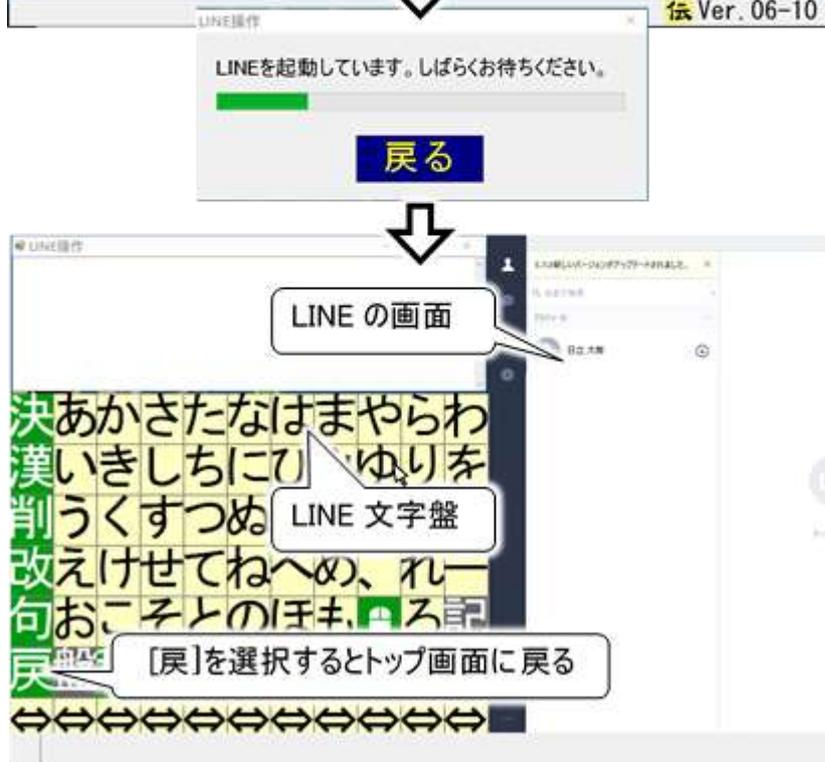

3

確認画面が表示されるので、[はい]を選択すると、LINE 操作画面を終了して、「伝の心」トップ画面に戻ります。



制限

LINE 画面が表示される前に、起動中のメッセージで「戻る」ボタンを選択すると、「伝の心」トップ画面に戻りますが、「伝の心」トップ画面の上に LINE 画面が表示される場合があります。その状態でも伝の心の操作は可能です。また、何かメニューを選択することによって LINE 画面の表示が遅くなりますので、そのまま操作可能です。

コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

LINE の友だち追加

LINE の友だち追加の一例(LINE ID で検索して友だち追加)を下記に説明します。



制限

友だちに追加したい相手には、LINE ID と、ID による友だち追加を許可の設定を、相手側で事前に行ってもらってください。
年齢確認の表示がされる場合は、スマホ版の LINE の設定から「年齢確認」をタップして「年齢確認」を行ってください。(PC 版 LINE のみで行っている場合は、デスクトップの「伝の心添付資料」の「LINE について」に対応方法が記載されていますのでご確認ください。)

1

389 ページの「LINE の起動と終了」を参照して LINE 操作画面を表示したら、LINE 文字盤の[人型アイコンに+マーク]を選択します。



2

文字盤と LINE 操作画面が非表示になり、右側 LINE 画面に「友だち追加リスト」が表示されます。また、マウス操作盤が表示され、マウス操作が可能になります。



3

LINE 画面の上部「友だち検索」にマウスカーソルを合わせて、マウス操作盤のサブメニューより[左クリック]を選択してください。



マウス操作盤の使用方法は、374 ページの「マウスを操作する」を参照ください。

コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う


4

友だち検索画面が表示されますので、「ID」にチェック☑が入っていない場合には、マウス操作盤のサブメニューより[左クリック]を選択して入れます。



5

マウス操作盤のサブメニューより[戻る]を選択して、マウス操作盤を終了させます。

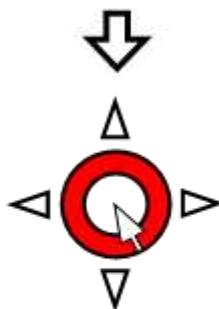


マウス操作盤を[戻る]で終了

- 左クリック
- 左ダブル
- スクロールボタン上(連続)
- スクロールボタン下(連続)
- 右クリック
- ドラッグ
- 低速→高速移動
- 戻る**

6


LINE 文字盤と LINE 操作画面が再び表示されるので、追加したい友だちの LINE ID を文字盤で入力します。

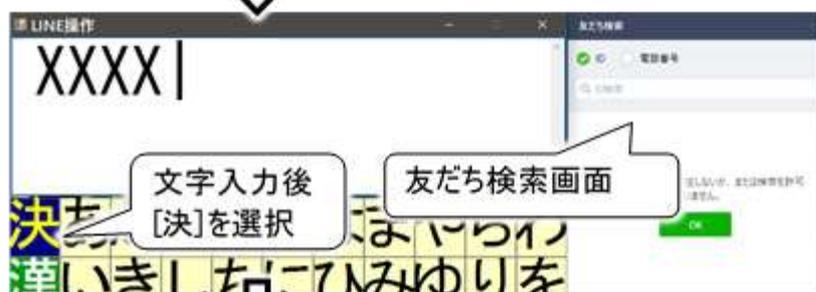

文字入力の方法については、64 ページの「文字入力の基本操作」を参照ください。

7

文字入力後、LINE 文字盤より[決]を選択すると、LINE 操作画面の文字が友だち検索画面に転送されます。

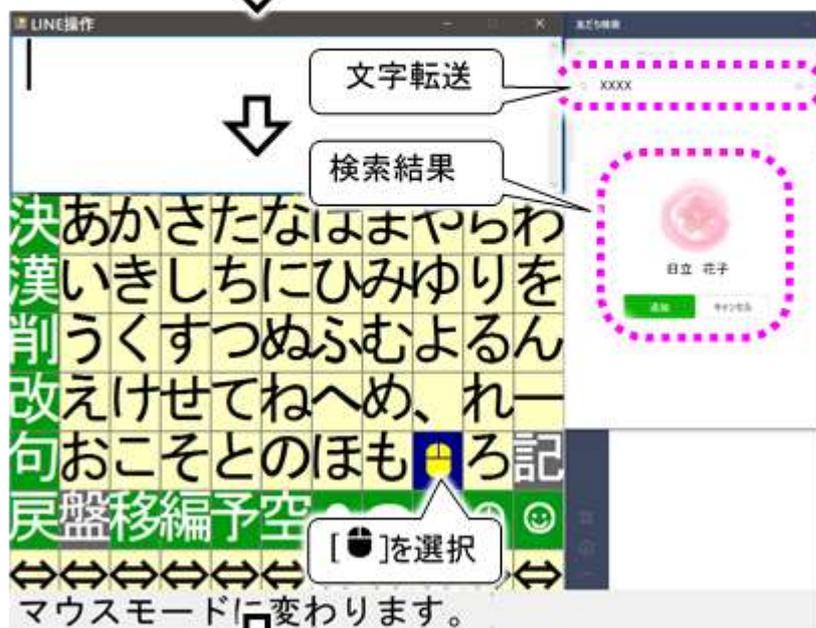

8

検索結果が友だち検索画面に表示されますので、LINE 文字盤の[🖱️](マウスのアイコン)を選択してマウス操作盤を表示します。

マウスモードに変わります。

コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う



補足

友だち検索画が画面の裏に表示される場合

LINE のバージョンによっては、LINE 操作画面の文字が友だち検索画面に転送された後、友だち検索画面が非表示(実際には LINE 画面の裏にあります)になる場合があります。[🖱️](マウスのアイコン)や[👤+](人型のアイコンに+マーク)を選択すると再表示されますので、操作を続けることが可能です。

9

友だち検索画面の「追加」ボタンにマウスカーソルを合わせて、マウス操作盤のサブメニューより[左クリック]を選択すれば、友だちリストに追加されます。



10

友だち検索を途中で止めたり、友だち追加後、友だち検索画面やホーム画面などが LINE 画面の左に残っていたりする場合は、友だち検索画面やホーム画面右上の「×」を、マウス操作盤のサブメニューより[左クリック]を選択して閉じてください。



11

LINE 画面の左に画面が残っていないことを確認して、マウス操作盤のサブメニューより[戻る]を選択して、文字盤に戻ってください。



補足

電話番号検索について

ID 以外にも、相手の電話番号で友だち追加が可能です。この場合、友だちに追加したい相手には、LINE の「設定 > 友だち > 友だちへの追加を許可」の設定を、相手側で事前に行ってもらってください。

コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

LINE の友だちリストからトークを開始する

友だちを追加したら、友だちリストからトークを始められます。

1

399 ページの「LINE の起動と終了」を参照して LINE 操作画面を表示したら、LINE 文字盤の[人型] (人型のアイコン) を選択します。

右側の LINE 画面は、友だちリストが表示されます。



2

文字盤側はサブメニューが表示されるので[↑]または[↓]を選択すると、友だちリストの選択位置が上または下に順次移動していきます。



3

トークしたい相手のところでスイッチ入力すると、選択位置の移動は止まり、右下に投稿画面が表示されます。

4

右下に投稿画面が表示されない場合は、391 ページの「LINE の友だち追加」を参照して LINE 文字盤の[マウスのアイコン] (マウスのアイコン) を選択してマウス操作盤を表示し、右側 LINE 画面の「トーク」ボタンにマウスカーソルを合わせて、マウス操作盤のサブメニューより[左クリック]を選択すれば、右下に投稿画面が表示されます。



コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

LINE のトークルームリストからトークを開始する

友だちリストからトークを開始したら、次回からはトークルームリストの選択でトークが行えます。



制限

LINE 操作画面に文字が残っている場合、トークルームや友達の変更ができません。一度 LINE 操作画面の文字を空にして[人]や[吹き出し]を選択してください。

1

389 ページの「LINE の起動と終了」を参照して LINE 操作画面を表示したら、LINE 文字盤の[吹き出し] (吹き出しのアイコン) を選択します。

右側の LINE 画面は、トークルームリストが表示されます。



2

文字盤側はサブメニューが表示されるので[先頭]または[末尾]、を選択すると、トークルームリストの選択位置が上または下に順次移動していきます。

トークしたい相手のところでスイッチ入力すると、選択位置の移動は止まります。

また、[先頭][末尾]を選択すると、トークルームリストの先頭または末尾に選択位置が移動します。



コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

LINE で文字入力して投稿する

394 ページの「LINE の友だちリストからトークを開始する」や 395 ページの「LINE のトークルームリストからトークを開始する」を行って、LINE 画面の右下に投稿画面が表示されている状態では、文字盤より文字入力を行い、投稿することができます。



注意

投稿する相手を確認しましょう

トークの相手が正しいかどうか、投稿する前に確認しましょう。

LINE 画面右側の友だちリストまたはトークルームリストの背景に色がついている相手が現在のトークの相手となります。


1

投稿したい内容を文字盤で入力します。

文字入力の方法については、64 ページの「文字入力の基本操作」を参照ください。

2

文字入力後、LINE 文字盤より[決]を選択すると、LINE 操作画面の文字が投稿画面に転送され、投稿されます。

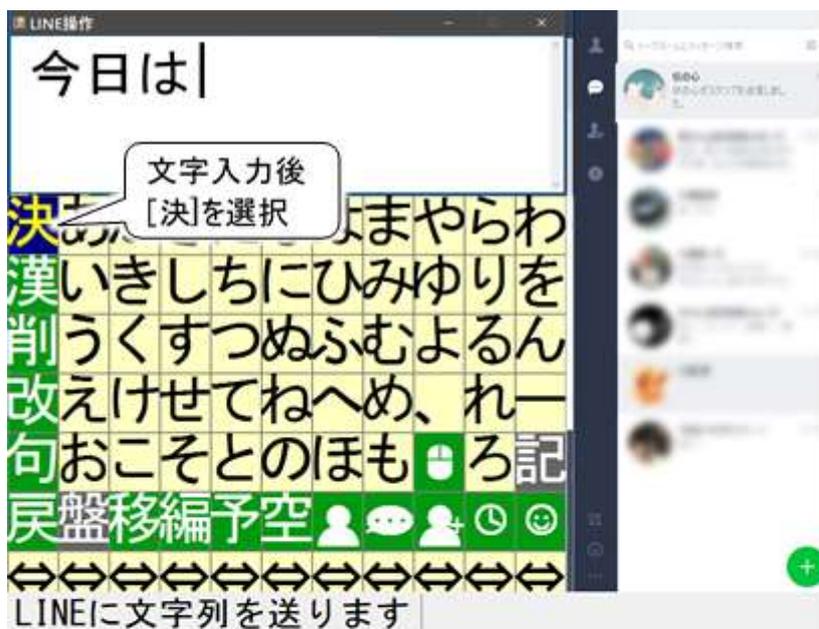

注意

未確定文字列について

LINE 操作画面の未確定文字列が2行に渡る場合、未確定文字が文字盤の下に隠れてしまう場合があります。

未確定文字は、小まめに変換/確定を行ってください。

コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

LINE でスタンプを投稿する

394 ページの「LINE の友だちリストからトークを開始する」や 395 ページの「LINE のトークルームリストからトークを開始する」を行って、LINE 画面の右下に投稿画面が表示されている状態では、スタンプも投稿することができます。



制限

LINE 操作画面に文字が残っている場合、スタンプ画面が表示できない場合があります。一度 LINE 操作画面の文字を空にして[😊]を選択してください。

1

389 ページの「LINE の起動と終了」を参照して LINE 操作画面を表示したら、LINE 文字盤の[😊](顔のアイコン)を選択します。



2

文字盤と LINE 操作画面が非表示になり、スタンプリストが表示されます。また、マウス操作盤が表示され、マウス操作が可能になります。



3

マウス操作盤のサブメニューから[スクロールボタン上(連続)]または[スクロールボタン下(連続)]を選択して、スタンプリストがスクロールします。

4

投稿したいスタンプにマウスカーソルを合わせて、マウス操作盤のサブメニューより[左クリック]を選択すれば、スタンプが投稿されます。



5

マウス操作盤のサブメニューより[戻る]を選択すると、LINE 文字盤に戻ります。

コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

LINE で絵文字を投稿する

397 ページの「LINE でスタンプを投稿する」と同様にして、絵文字も投稿することができます。



制限

LINE 操作画面に文字が残っている場合、スタンプ画面が表示できない場合があります。一度 LINE 操作画面の文字を空にして[😊]を選択してください。


1

397 ページの「LINE でスタンプを投稿する」を参照して、スタンプリストとマウス操作盤を表示します。




2

スタンプリストの上部「絵文字」タブにマウスカーソルを合わせて、マウス操作盤のサブメニューより[左クリック]を選択して、スタンプリストを絵文字リストに切り替えます。

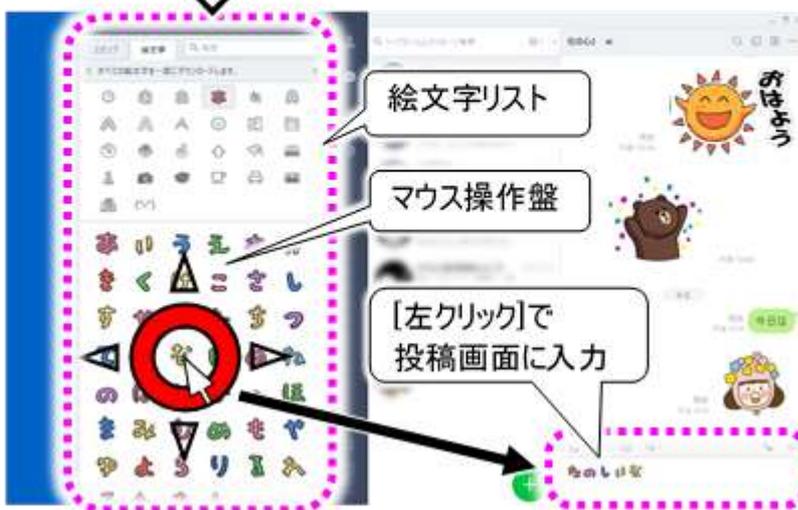

3

入力したい絵文字にマウスカーソルを合わせ、マウス操作盤のサブメニューより[左クリック]を選択すれば、投稿画面に絵文字が入力されます。

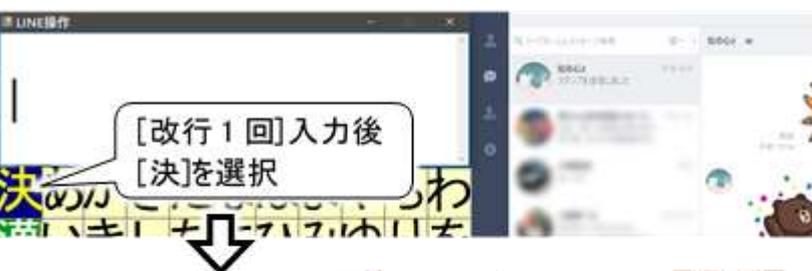


4

次に、マウス操作盤のサブメニューより[戻る]を選択して、LINE 文字盤に戻ります。

5

文字盤から[改]→[改行 1回]を選択して改行を入力後、[決]を選択すると、投稿画面の絵文字が投稿されます。

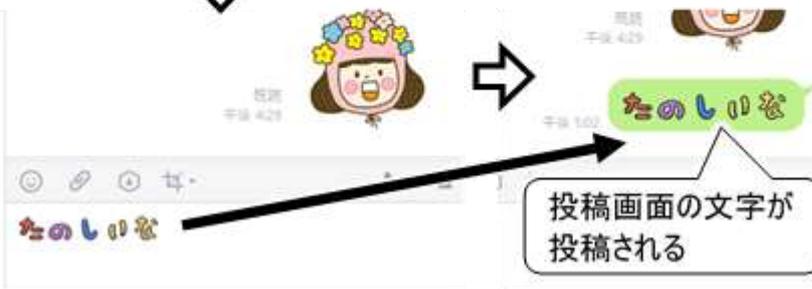

コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

LINE でタイムラインを表示する

LINE のタイムラインの表示が可能です。投稿や公開設定等は別途マウス操作盤を表示して行います。



補足

LINE のタイムラインについて

タイムラインの投稿や公開設定はマウス操作になりますので、ご自身でマウス操作盤にて行うか、支援者の方に行ってもらってください。

1

389 ページの「LINE の起動と終了」を参照して LINE 操作画面を表示したら、LINE 文字盤の[🕒](時計のアイコン)を選択します。

右側の LINE 画面は、タイムラインの画面が表示されます。



2

タイムラインの画面の操作は、LINE 文字盤の[🖱️](マウスのアイコン)を選択して表示されるマウス操作盤から行ってください。



3

文字を入力する場合、入力位置にマウスカーソルを合わせ、マウス操作盤のサブメニューより[左クリック]を選択後、[戻る]で文字盤に戻れば、文字入力が可能になります。

文字入力後[決]の選択で、入力位置に文字が転送されます。

コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う

LINE のヘルプを表示する

LINE の使用方法や機能の説明は LINE のヘルプセンター（※ブラウザが起動します。）で確認できます。ヘルプセンターの表示方法をご紹介します。

1

389 ページの「LINEの起動と終了」を参照して LINE 操作画面を表示したら、LINE 文字盤の[]（マウスのアイコン）を選択してマウス操作盤を表示します。



2

LINE 画面左下の「...」アイコンにマウスカーソルを合わせ、マウス操作盤のサブメニューより[右クリック]してメニューを表示します。



3

表示されたメニューから、「ヘルプ」にマウスカーソルを合わせ、マウス操作盤のサブメニューより[左クリック]を選択すると、ブラウザが起動して LINE のヘルプセンターが表示されます。



補足

LINE の設定について

LINE 画面左下の「...」アイコンから表示されるメニューに「設定」があります。ここから LINE の設定画面が表示可能です。