

～アラーム通報トラブルの監視通報器～

やさしさをカタチに

 **TOKSO**

トクソー技研株式会社

アラーム通報器

アラームアイSOY

アラーム通報・カニューレの外れ・痰の詰まりなどに!!



- POINT 1 各種機器のアラーム音やアラーム信号を検知して通報します
- POINT 2 遅延タイマーで看護作業時等の誤通報を防止します
- POINT 3 機器の信号コード・ナースコール接続コードが外れたらアラーム通報します
- POINT 4 アラームアイ本体の電源が落ちた時にアラーム通報します
- POINT 5 アラーム音検知は小型センサーなので容易に取り付けができます

使用上のご注意


本機器は、患者や機器の異常を検知して通報しますが、安全を保証する機器ではありません。あくまで、補助機器としてご使用ください。



TOKSO MEDICAL


医療、介護現場で使用する機器はトラブル発生時、アラーム音やアラーム信号を発しますが、介助者に通報が届かず事故になる心配があります。
本製品はそうした機器のアラーム信号・アラーム音を検知して介助者へ通知することで安全の確保に役立つ機器です。

機器構成図(例)

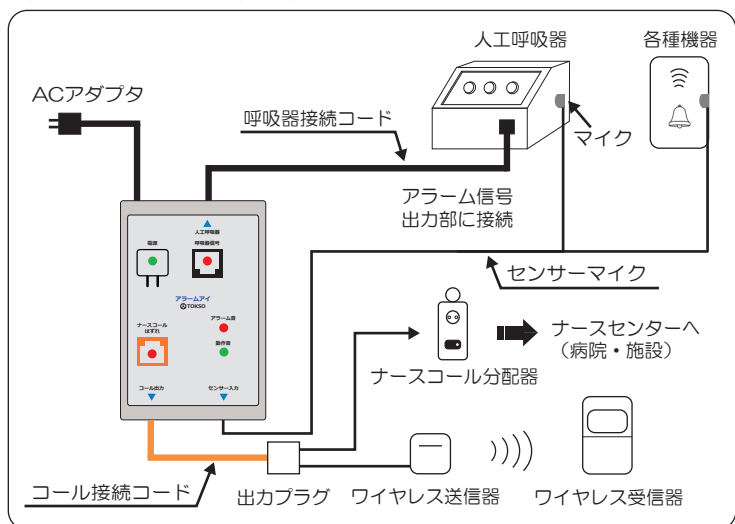

- ・呼吸器接続コードは、人工呼吸器に合った専用コード（別売品）になります。
- ・コール接続コードはナースコールシステムに合った専用コード（別売品）になります。
- ・センサーマイクは、アラーム音や動作音を検知したい場合に使用します

様々な場面に対応

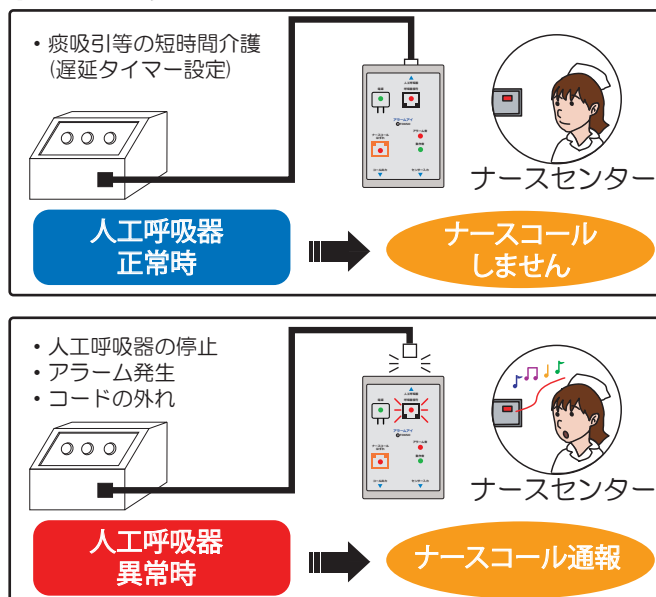

仕様

商品名	アラームアイSOY
品番	00204B00
検知方式	各種アラーム信号検知 各種アラーム音検知
通報方式	有線式
接続方式	ナースコール接続
遅延設定	0～45秒（5秒間隔で設定） （一定時間アラームが鳴ると異常通報）
電源	DC6V（ACアダプタ直付）
外径寸法	幅70×高30×奥115mm
質量	180g

※製品改良のため、予告なく仕様および価格等を変更する場合がありますので、ご了承ください。

ご注意

- 本商品は、各種機器のアラーム音やアラーム信号を検知して通報し、未然に事故防止を図るものですが、直接的に安全を確保するものではありません。
- 対象機器の安全管理に努めていただき、本商品はあくまで補助器としてご使用ください。
- 万一発生した人身事故や損害については、責任を負いませんのでご了承ください。

ご購入前に

- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。予めご了承ください。
- このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店へご連絡ください。

【販売店】

【製造販売元】

トクソー技研株式会社

〈本社〉

〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地

TEL：0978-33-5595 FAX：0978-33-5596

MAIL：info@amor.co.jp HP：http://www.tokso.net